

INTEGRADOR QUÍMICO CLEAN TEST - TIRAS

Ref: 1258, 1260 e 1261

Tipo 5

Excelente
estabilidade



Sobre o produto

- ⇒ Integrador conforme **ISO 11140: 2014**.
- ⇒ Monitoramento de processos de **esterilização a vapor**.
- ⇒ Leitura **fácil e imediata**.
- ⇒ Ótimo **custo benefício**.

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

ITEM#	EMBALAGEM
1258	PACOTE COM 25 UNIDADES
1260	PACOTE COM 100 UNIDADES
1261	PACOTE COM 250 UNIDADES

Descrição do Produto

Integrador Químico para Monitoramento de Processos de Esterilização a Vapor. Proporciona uma leitura fácil e imediata, possui uma camada plástica que impede que a tinta do indicador entre em contato com os instrumentos esterilizados. Excelente estabilidade indicadora antes e depois da exposição. Monitoramento de tempo, temperatura e qualidade de vapor em relação a curva de morte do indicador biológico.

Os parâmetros críticos de esterilização são:

Temperatura	Tempo	Condição
121 °C	16,5 min	Vapor Saturado
128 °C	9,0 min	Vapor Saturado
134 °C	3,5 min	Vapor Saturado

Esta condição é calibrada com o tempo de morte de esporos *Geobacillus stearothermophilus*, calculado em um BIER (Biological Indicator Evaluator Resistometer), conforme estipulado em ISO 11140 para um Indicador químico Tipo 5.

Classificação: Tipo 5.

As características do integrador Clean Test atendem os requisitos contidos em ISO 11140: 2014.

Instrução de Uso

1. Destaque uma unidade de integrador da cartela sem remove-lo do liner (papel base do autoadesivo). Coloque o Integrador na embalagem a esterilizar.
2. Execute o ciclo de esterilização.
3. Avalie a mudança de cor, a área que inicialmente é rosa, agora deve ser igual ou mais escura que a cor de referência presente no produto.
4. Caso não ocorra a mudança de cor adequada conforme apresentado no gabarito para um indicador processado e aprovado, investigue o processo e os demais indicadores químicos que monitoram o esterilizador, bem como o teste biológico. Todo material deve ser esterilizado novamente com nova tira de integrador.
5. Documente os resultados removendo o liner do integrador e adesivo no local de registro. O local de registro deve ser um ambiente protegido de luz e de alta umidade.

Características Físicas

Produto é Lead Free - Livre de chumbo.

Medidas: 75mm x 19mm


Identificação: Lote e data de validade estão impressos em cada tira.

Produto fabricado por: Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda.

Gabarito


Não Processado

Produto apresentando um padrão de cor inicial rosa.

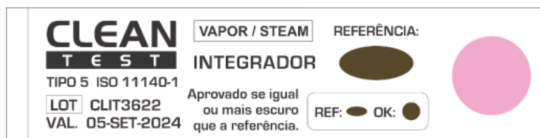


Processado e Falho

Coloração mais clara que a cor de referência, parâmetros críticos do processo não alcançados.

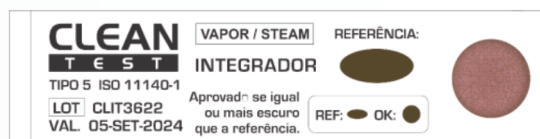


Processado e Aprovado

Coloração igual a cor de referência, parâmetros críticos do processo alcançados.

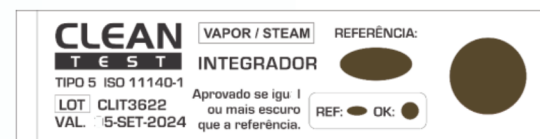

Processado e Aprovado

Coloração mais escura que a cor de referência, parâmetros críticos do processo alcançados e superados.

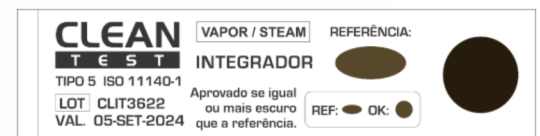

Obs: As cores mostradas são representações das cores iniciais e de sinal da tinta impressa, mas podem variar em relação ao uso real. Cor irreversível quando armazenado em conformidade com os critérios de armazenagem para o produto.

Armazenamento



Temperatura: 10 °C a 30 °C.



Umidade relativa: 30% a 80%.



Mantenha em local seco, sem condensação.



Mantenha protegido de agentes esterilizantes, luzes solares, radiação, etc.